

Nucu^{Sointu} ohjekirja

Sisällysluettelo

1)	Pakkauksen sisältö.....	3
2)	Nucupesän ohjausyksikön säätimet ja merkkivalot	4
3)	Nucupesän perustila	5
4)	Käyttö.....	6
5)	Akun lataaminen ja käyttöaika	8
6)	Mobiililaitteen liittäminen nucupesään	9
7)	ääniraitojen lisääminen nucupesän soittolistaan (windows PC)	10
8)	Puhdistusohjeet	11
9)	Kasaaminen puhdistuksen jälkeen.....	13
10)	Tekniset tiedot ja käyttösuositukset	13
11)	Asiakastuki	13

1) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Nucupesä



Nucu alusta (pesän pohjaosan sisällä)



Virtalähde



USB - Micro USB -kaapeli




3,5mm äänijohto

Huomautuksia:


1. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä Nucu asiakaspalveluun
 - info@nucu.fi
2. Sairaalakäytössä virtalähteen tulee olla Medical-hyväksyty. Tarkista, että virtalähteestä löytyy "Approved Medical Device" teksti

2) NUCUPESÄN OHJAUSYKSIKÖN SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

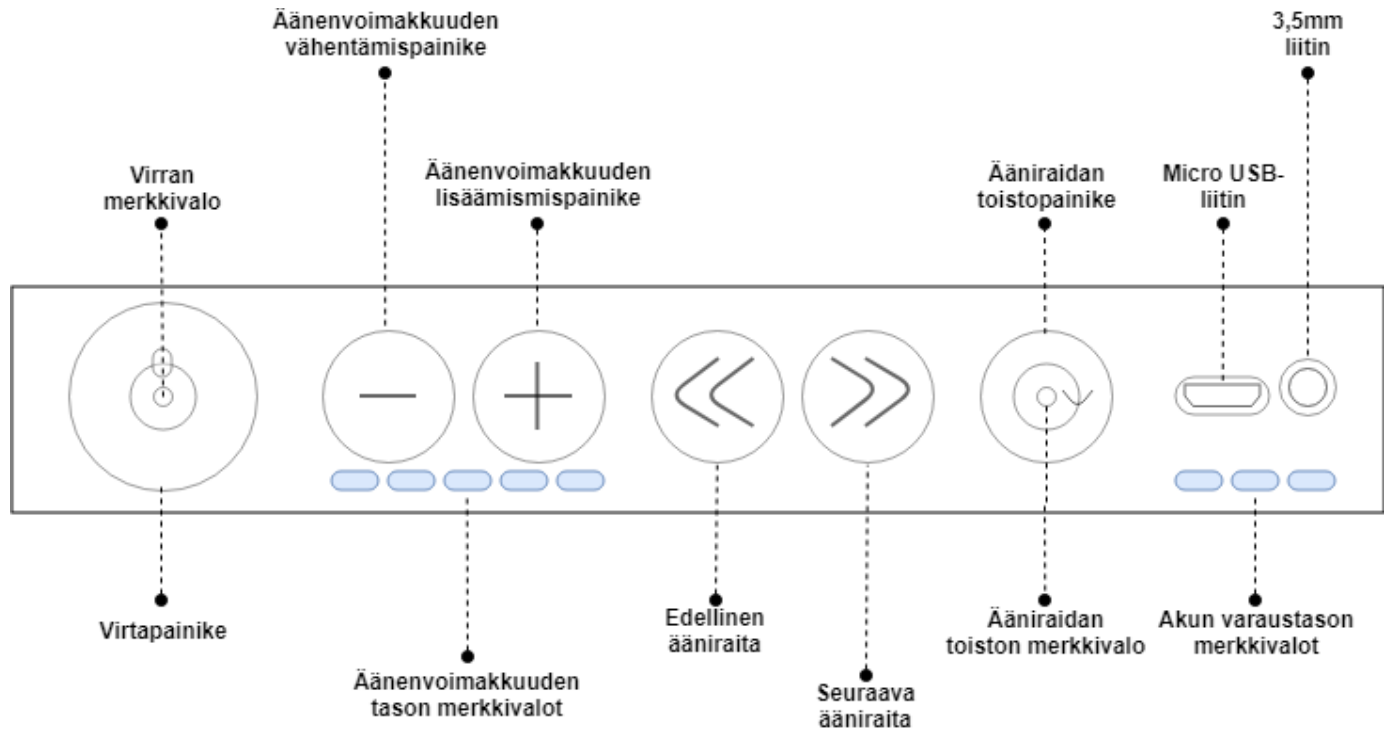

3) NUCUPESÄN PERUSTILA

Nucupesä menee aina käynnistyessään ns. Perustilaan. Perustilassa laite käyttää seuraavia asetuksia:

1. Toistetaan syke ääniraitaa, jos käyttäjä ei ole asettanut toisin
2. Äänenvoimakkuuden taso asetetaan tasolle kaksi 
3. Ääniraidan jatkuva toistotila asetetaan päälle


Nucupesä sisältää aina seuraavat ääniraidat:

1. Syke
2. Sade
3. Nuku nuku nurmilintu

4) KÄYTTÖ

Nucupesän kaikkia toimintoja hallitaan ohjausyksikössä sijaitsevilla painikkeilla ja liittimillä. Kun olet asettanut haluamasi äänimaiseman ja äänenvoimakkuuden aseta Nucupesä tasaiselle alustalle ja laske vauva siihen. Tarkkaile vauvan vointia alustalla. Älä jätä vauvaa ilman valvontaa alustalle.


Huomautuksia:

1. Ohjausyksikkö menee lepotilaan 30 sekunnissa mikäli mitään painikkeita ei paineta. Lepotilassa painikkeet eivät ole aktiivisia. Lepotilassa äänenvoimakkuuden tasojen sekä akun varaustason merkkivalot sammuvat
2. Ohjausyksikön saa aktivoitua lepotilasta painamalla virtapainiketta  kerran. Ohjausyksikön aktivoituessa äänenvoimakkuuden tasojen sekä akun varaustason merkkivalot syttyvät

AKTIIVINEN OHJAUSYKSIKÖ



LEPOTILASSA OLEVA OHJAUSYKSIKÖ

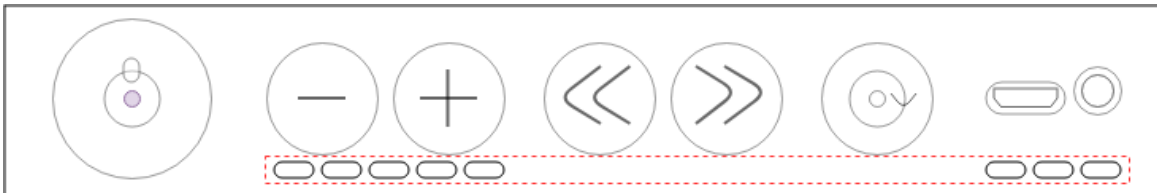

Toiminto	Toimintaohjeet	Painike
Käynnistä Nucupesä	Paina virtapainiketta kerran. Virran merkkivalon syttyttyä laite on käyttövalmis	
Sammuta Nucupesä	Pidä virtapainiketta pohjassa kunnes virran merkkivalo sammuu (noin 3 sekunnin ajan)	
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina äänenvoimakkuuden lisäämispainiketta kerran. Jokaisella painalluksella äänentaso nousee yhden pykälän	
Vähennä äänenvoimakkuutta	Paina äänenvoimakkuuden vähentämispainiketta kerran. Jokaisella painalluksella äänentaso laskee yhden pykälän	
Siirtyminen edelliseen ääniraitaan	Paina Edellinen ääniraita -painiketta kerran.	
Siirtyminen seuraavaan ääniraitaa	Paina Seuraava ääniraita -painiketta kerran	
Ääniraidan jatkuvan toiston asetus	Paina Ääniraidan toistopainiketta kerran. Merkkivalon palaessa ääniraidan jatkuva toistotila on päällä. Merkkivaloen ollessa sammuksissa toistotila on pois päältä	
Mobiililaitteen liittäminen äänilähteeksi	Kts. Kohdasta 6) Mobiililaitteen liittäminen nucupesään	
Omien ääniraitojen lisääminen nucupesään	Kts. Kohdasta 7) Ääniraitojen lisääminen nucupesän soittolistaan	

Huomautus: Nucupesä ei sammu, jos se on kytketty USB-kaapelilla tietokoneeseen.

5) AKUN LATAAMINEN JA KÄYTTÖAIKA

Nucun akun lataaminen tapahtuu virtalähteen ja siihen liitettävän micro USB -kaapelin avulla. Nucun voidaan ladata myös sen ollessa käytössä.

Lataamisen vaiheet:

1. Kytke USB -kaapelin päät

a) virtalähteen USB -liitäntään



Nucupesän Micro USB -liitäntään



2. Kytke virtalähde verkkovirtaan. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää n. 10 tuntia.

Käyttöaika: Täysi akku kestää käytössä n. 19 tuntia.

6) MOBIILILAITTEEN LIITTÄMINEN NUCUPESÄÄN

Halutessasi voit liittää mobiililaitteen Nucupesään ja toistaa haluamiasi ääniä Nucupesän kautta.

Vaiheet:

1. Kytke 3,5mm äänijohdon päät

a) Nucu-pesään



b) mobiililaitteeseen



2. Valitse mobiililaitteella soitettava ääniraita ja laita se soimaan

Huomautus: Kun mobiililaitte kytetään Nucupesään ohjausyksikkö menee lepotilaan. Mobiililaitteesta tulee Nucupesän käyttäjä. Tämä tarkoittaa, että ääniraidan valinta sekä äänenvoimakkuuden tason säätäminen tehdään mobiililaitteella.

7) ÄÄNIRAITOJEN LISÄÄMINEN NUCUPESÄN SOITTOLISTAAN (WINDOWS PC)

1. Tarkista, että Nucupesä on sammuksissa eikä USB-kaapelia ole vielä kytketty
2. Kytke USB -kaapelin päät


a) Nucupesän Micro USB -liitäntään



b) Tietokoneen USB -liitäntään




3. Nucupesä käynnistyy USB -kaapelin kytkemisen jälkeen automaattisesti. Nucupesä näkyy nyt USB-muistilaitteena omassa tietokoneessa

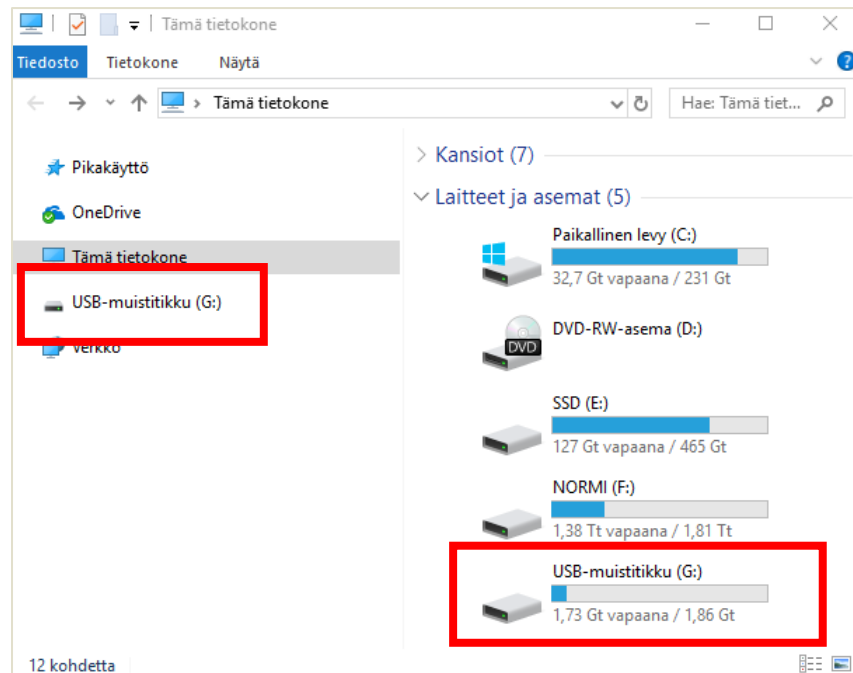

4. Kopioi haluamasi äänitiedostot Nucupesä USB -muistilaitteeseen normaalisti kopioi -> liitä toiminnoilla

8) PUHDISTUSOHJEET

Nucupesän kangasosat ovat konepestäviä. Puinen alusta voidaan puhdistaa desinfiointiaineella. Pese Nucupesä tarpeen mukaan.

Kankaan päämateriaali: 100% puuvilla, hoito-ohjeet: 

Puhdistamisen vaiheet:

1. Aukaise

a) reunapehmusteen vetoketju

b) pohjaosion vetoketju



2. Vedä ulos

a) alusta sekä sen päällä oleva patja

b) reunapehmuste



3. Pyyhi alusta desinfiointiaineella



4. Pese kangasosat pyykinpesukoneessa



5. Anna kangasosien kuivua hyvin

9) KASAAMINEN PUHDISTUKSEN JÄLKEEN

Puhdistuksen jälkeen kaikkien osien ollessa kuivia, voit koota pesän käyttökuntoon.

Kokoamisen vaiheet:

- 1) Pujota patja pohjaosion sisään
- 2) Liu'uta alusta patjan alle
- 3) Asettele reunapehmuste paikoilleen
- 4) Sulje pohjaosion ja reunapehmusteen vetoketjut huolellisesti

10) TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Suositeltu käyttölämpötila -10 °C – 40 °C
- Nucun on pöly- ja roisketiivis, IP54
- Akun lataustoiminnon lämpötila rajoitettu 0 °C – 40 °C välille
- Nucun on suunniteltu ja valmistettu Suomessa



11) ASIAKASTUKI

- info@nucu.fi
- www.nucu.fi/tuki