

# Nucu<sup>Sointu</sup> bruksanvisning

# Innehåll

1)	Förpackningens innehåll .....	3
2)	Nucu kontrollenhets regulatorer och indikatorer .....	4
3)	Nucu babynest basläge .....	5
4)	Användning.....	6
5)	Batteriladdning och användningstid .....	8
6)	Anslut en mobil enhet till nucu babynest.....	9
7)	Lägg till ljudspår till nucu babynest (windows PC) .....	10
8)	Anvisningar för rengöring .....	11
9)	Montering efter rengöring.....	13
10)	Tekniska data och rekommendationer för bruk.....	13
11)	Kundservice .....	13

---

## 1) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

---

Kontrollera att förpackning innehåller följande delar:



Nucu baby nest



Nucu plattform (inom bottendelen av baby nest)



Strömförsörjning



USB - Micro USB -kabel




3,5mm ljudkabel

### Anmärkningar:

1. Om någon del av produkten är skadad, använd den inte. Kontakta Nucu kundservice:
  - [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
2. Vid sjukhusanvändning måste strömförsörjningen alltid vara Medical godkänd. Kontrollera att texten "Approved Medical Device" finns på strömförsörjningen.

## 2) NUCU KONTROLLENHETS REGULATORER OCH INDIKATORER


---

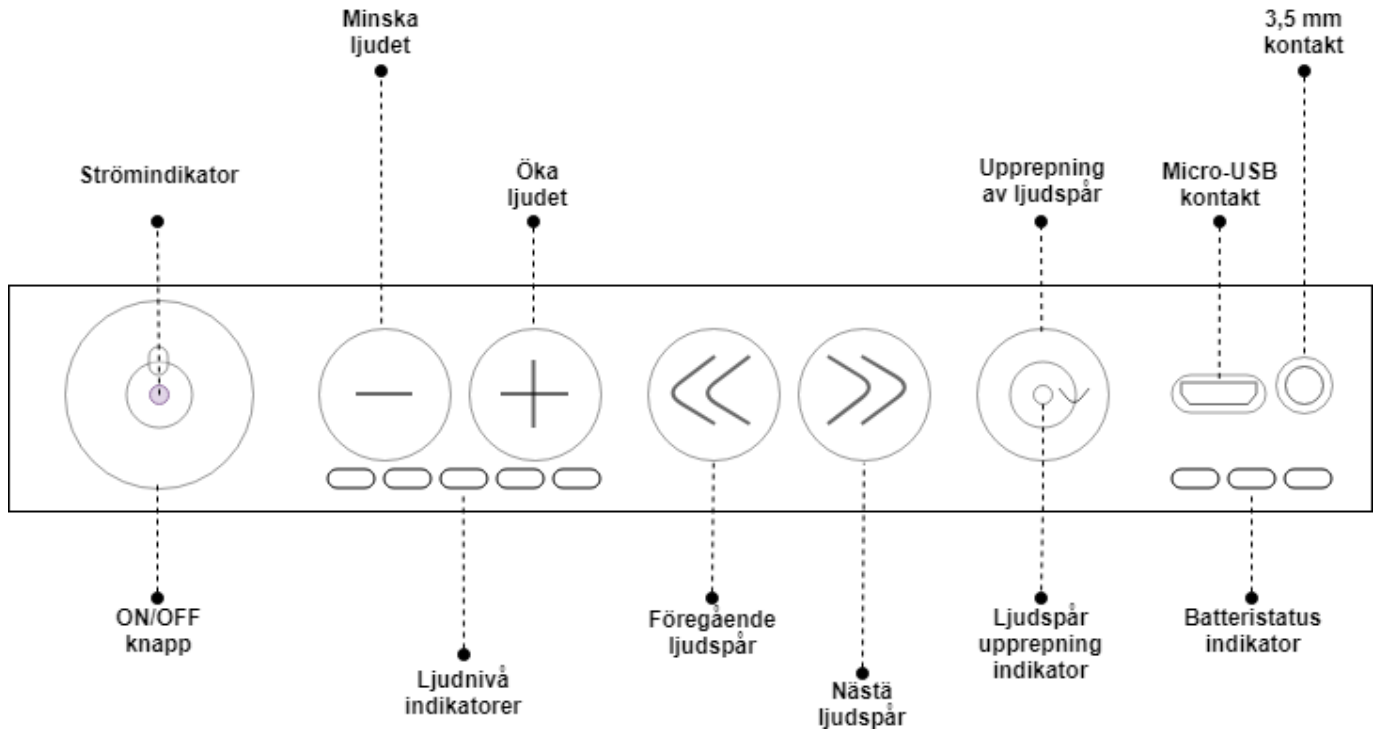

### 3) NUCU BABYNEST BASLÄGE

---

Varje gång Nucu babynest är påslagen går den till en så-kallad basläge. I basläge använder enheten följande inställningar:

1. Hjärtslagets ljudspår upprepas, om inget annat anges av användaren
2. Ljudnivån är inställd på nivå två 
3. Kontinuerlig upprepning av ljudspår är inställd

Nucu babynest innehåller alltid följande ljudspår:


1. Hjärtslag
2. Regn
3. Nuku nuku nurmilintu (Nurmilintu vaggvisa)

## 4) ANVÄNDNING

---

Alla funktioner av Nucu babynest styrs av knapparna och kontakterna i kontrollenheten. Efter du har valt önskad ljudlanskap och ljudnivå i inställningarna, placera babynest på en plan yta och lägg barnet i den. Övervaka barnets välbefinnande på plattformen. Lämna inte barnet utan bevakning på plattformen.


### Anmärkningar:




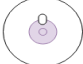



1. Kontrollenheten går i viloläge i 30 sekunder om inga knappar trycks innan det. Knapparna är inte aktiva i viloläge. Ljudnivå och batteristatus indikatorer släcks i viloläge
2. Kontrollenheten kan aktiveras av viloläge genom att trycka på ON/OFF  en gång. När kontrollenheten är aktiverad, tänds indikatorer på ljudnivåer och batteristatusen.

### AKTIV KONTROLLENHET

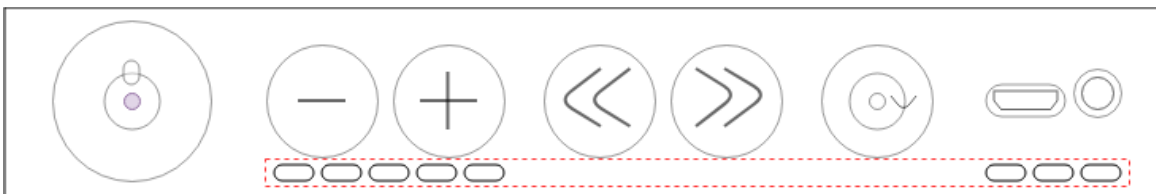

### KONTROLLENHET I VILOLÄGE

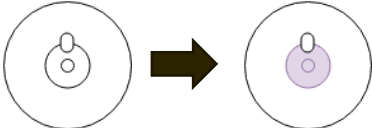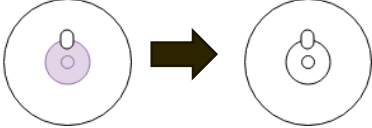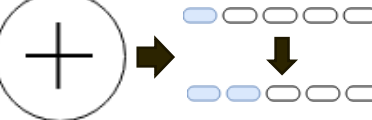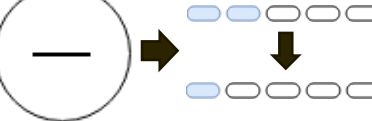

Funktion	Åtgärd	Knapp
Starta Nucu baby nest	Tryck på ON/OFF -knappen en gång. När ström indikatorn tänds är baby nest klar att använda.	
Stäng av Nucu baby nest	Håll ON/OFF -knappen helt ner tills indikatorlampan släcks (c. under 3 sekunder)	
Öka ljudnivå	Tryck indikatorn för att öka ljudnivån en gång. Med varje tryck ökar ljudnivån med ett steg.	
Minska ljudnivå	Tryck indikatorn för att minska ljudnivån en gång. Med varje tryck minskar ljudnivån med ett steg.	
Gå till föregående ljudspår	Tryck Föregående ljudspår -knapp en gång.	
Gå till nästa ljudspår	Tryck Nästa ljudspår -knapp en gång.	
Inställning för kontinuerlig upprepning av ljudspår	Tryck knappen Upprepning av ljudspår en gång. När indikatorlampan lyser spelas ljudspåret kontinuerligt. När indikatorlampan är släckt, avaktiveras kontinuerlig upprepning av ljudspåret.	
Anslut en mobil enhet som ljudkälla	Se punkt 6) Anslut en mobil enhet till Nucu baby nest	
Lägg till dina egna ljudspår till Nucu baby nest	Se punkt 7) Lägg till ljudspår till Nucu baby nest	

**Anmärkning:** Nucu babynest stängs inte av, om den är ansluten till en datorn via en USB -kabel.

## 5) BATTERILADDNING OCH ANVÄNDNINGSTID

---

Nucu batteriet laddas med en strömförsörjning/adapter och en micro USB -kabel som anslutas i den. Nucu kan också laddas under användningen.

Uppladdning av batteriet:

### 1. Anslut USB -kabels ändrar

a) till USB -porten i strömförsörjningen



b) till Micro USB -porten i Nucu babynest



### 2. Anslut strömförsörjning till elnätet. Det tar cirka 10 timmar att ladda ett tomt batteri.

**Användningstid:** Ett fulladdat batteri varar cirka 19 timmar.



## 6) ANSLUT EN MOBIL ENHET TILL NUCU BABYNEST

---

Om du vill kan du ansluta en mobil enhet till Nucu babynest och återge dina valda ljudspår via Nucu babynest.

Olika steg:

1. Anslut 3,5mm ljudkabels ändar till

a) Nucu babynest



b) mobil enheten



2. Välj ljudspåret som du vill spela med mobil enheten och sätt på ljudspåret

**Anmärkning:** När en mobil enhet anslutas till Nucu babynest, övergår kontrollenheten till viloläge. Mobil enheten blir Nucu babynests användare. Det betyder att man väljer ljudspåren och sätter ljudnivån via mobil enheten.

## 7) LÄGG TILL LJUDSPÅR TILL NUCU BABYNЕСТ (WINDOWS PC)

1. Kontrollera, att Nucu babynest är avstängd och att USB -kabeln är inte ännu ansluten.
2. Anslut USB-kabelns ändar


a) till Micro USB-kontakten i Nucu babynest



b) till USB-kontakten i datorn



3. Efter USB -kabeln är ansluten, aktiveras Nucu babynest automatiskt. Nucu babynest visas nu som en USB -minnesenhet på din dator

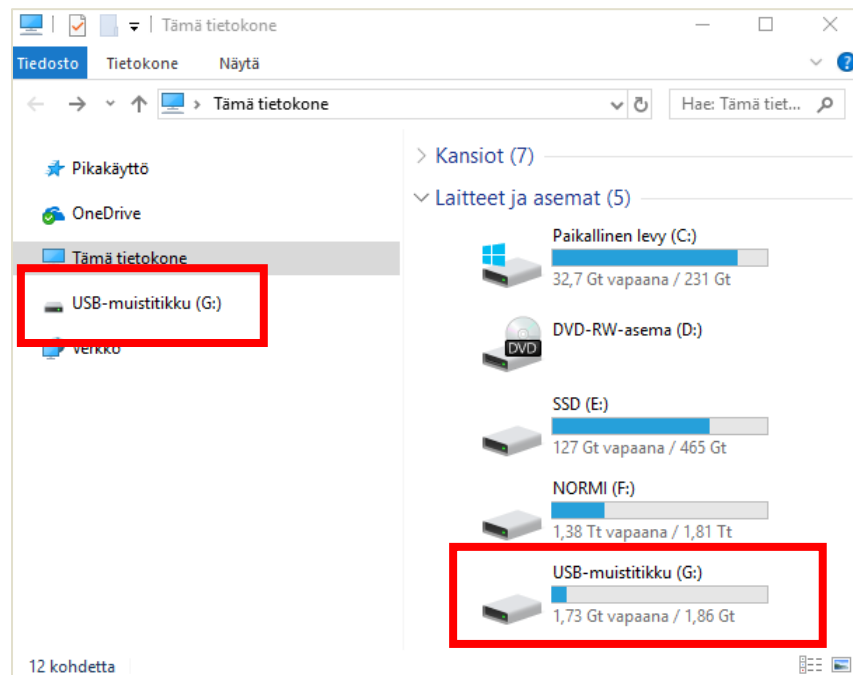


4. Kopiera de önskade .mp3- ljudfilerna till Nucu babynests USB-minnesenhet på det vanliga sättet genom att använda klipp och klistra -funktion.

## 8) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

---

De delar i Nucu babyneest som är tillverkade av tyg är maskin tvättbara. Träplattformen kan rengöras med desinfektionsmedel. Tvätt Nucu babyneest vid behov.

Tygets huvudsakliga material: 100% bomull, skötselråd: 

Olika steg av rengöring:

### 1. Öppna

a) blixtlåset i vadderade kanten

b) blixtlåset i bottendelen



### 2. Dra ut

a) plattformen och madrassen ovanpå

b) vaddering i kanten



3. Rengör plattformen med en desinfektionsmedel



4. Tvätta tygdelar i tvättmaskin



5. Låt alla tygdelar torka väl

## 9) MONTERING EFTER RENGÖRING

---

När alla delar har torkad efter rengöringen, kan du ommontera babynest i normalt brukskick.

Olika steg av montering:

- 1) Justera madrassen i fickan på bottendelen av Nucuu babynest.
- 2) Skjut in plattformen under madrassen.
- 3) Sätt in vaddering i sin plats.
- 4) Tillslut noggrant blixtlåsen i bottendelen och vadderade kanten.

## 10) TEKNISKA DATA OCH REKOMMENDATIONER FÖR BRUK

---

- Rekommenderat driftstemperatur -10°C – 40°C
- Nucuu är damm- och stänktät, IP54
- Temperaturen för batteriladdningsfunktionen är begränsad till 0°C – 40°C
- Nucuu är designad och tillverkad i Finland



## 11) KUNDSERVICE

---

- [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
- [www.nucu.fi/tuki](http://www.nucu.fi/tuki) (kundstöd)