



BRUKSANVISNING

# Innehåll

1)	Förpackningens innehåll .....	3
2)	Nucu kontrollenhets regulatorer och indikatorer .....	4
3)	Nucu basläge .....	5
4)	Användning.....	6
5)	Batteriladdning och användningstid .....	8
6)	Anslut en mobil enhet till nucu .....	9
7)	Lägg till ljudspår till nucu (windows PC).....	10
8)	Anvisningar för rengöring .....	11
9)	Montering efter rengöring.....	13
10)	Tekniska data och rekommendationer för bruk.....	13
11)	Kundservice .....	13

---

## 1) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

---

Kontrollera att förpackning innehåller följande delar:



Nucu baby nest (tilläggstjänster)



Nucu plattform



Strömförsörjning



USB - Micro USB -kabel




3,5mm ljudkabel

### Anmärkningar:

1. Om någon del av produkten är skadad, använd den inte. Kontakta Nucu kundservice:
  - [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
2. Vid sjukhusanvändning måste strömförsörjningen alltid vara Medical godkänd. Kontrollera att texten "Approved Medical Device" finns på strömförsörjningen.

## 2) NUCU KONTROLLENHETS REGULATORER OCH INDIKATORER


---

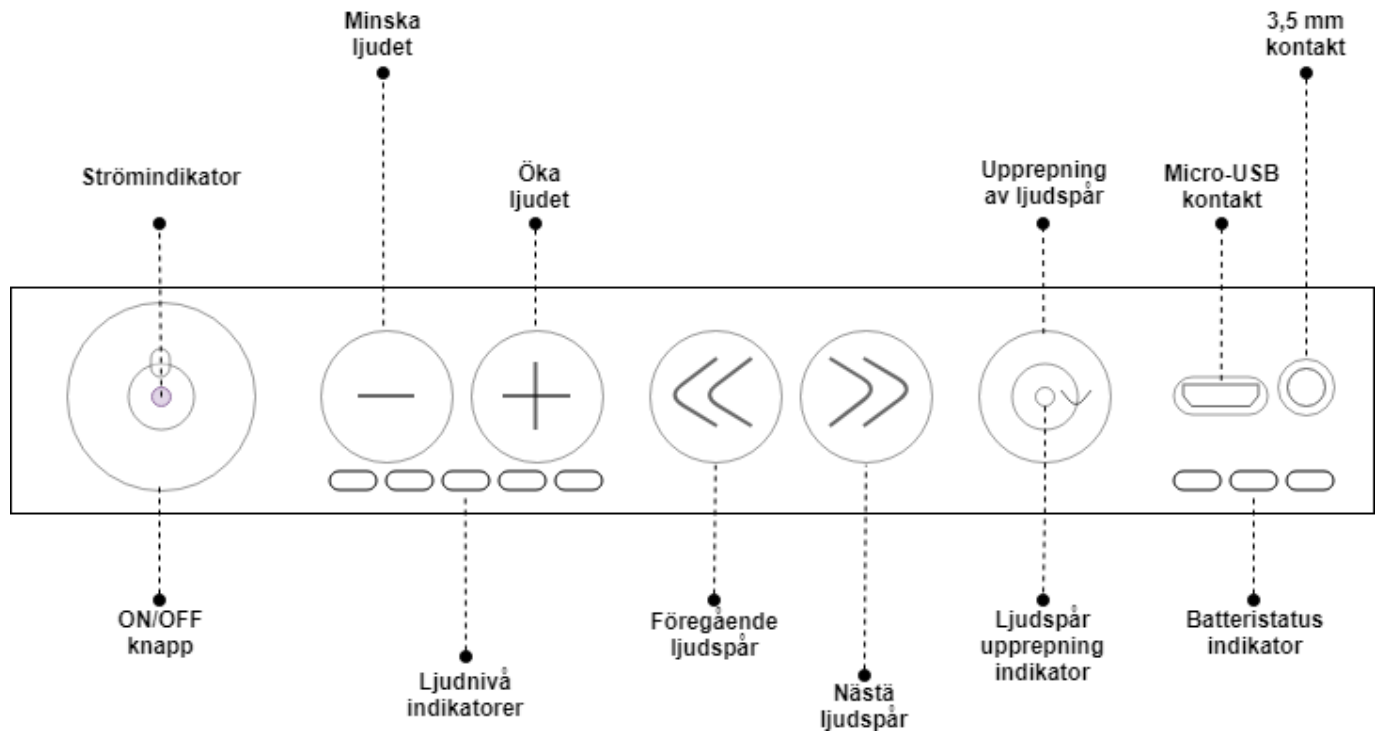

### 3) NUCU BASLÄGE

---

Varje gång Nucú är påslagen går den till en så-kallad basläge. I basläge använder enheten följande inställningar:

1. Hjärtslagets ljudspår upprepas, om inget annat anges av användaren
2. Ljudnivån är inställd på nivå två 
3. Kontinuerlig upprepning av ljudspår är inställd

Nucú innehåller alltid följande ljudspår:


1. Hjärtslag
2. Regn
3. Nuku nuku nurmilintu (Nurmilintu vaggvisa)

## 4) ANVÄNDNING

---

Alla funktioner av Nucu styrs av knapparna och kontakterna i kontrollenheten.


### Anmärkningar:








1. Kontrollenheten går i viloläge i 30 sekunder om inga knappar trycks innan det. Knapparna är inte aktiva i viloläge. Ljudnivå och batteristatus indikatorer släcks i viloläge
2. Kontrollenheten kan aktiveras av viloläge genom att trycka på ON/OFF  en gång. När kontrollenheten är aktiverad, tänds indikatorer på ljudnivåer och batteristatusen.

### AKTIV KONTROLLENHET

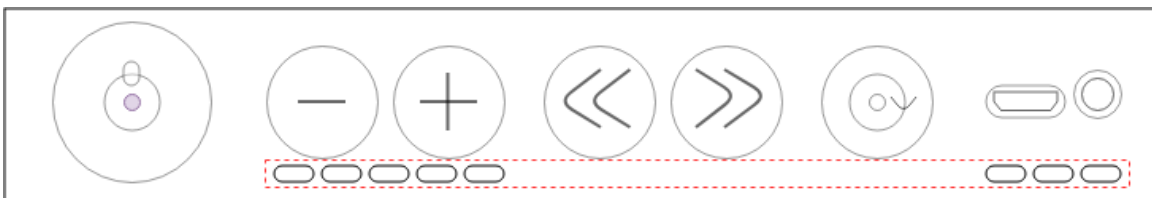

### KONTROLLENHET I VILOLÄGE

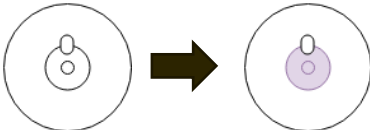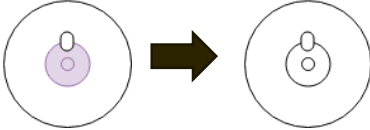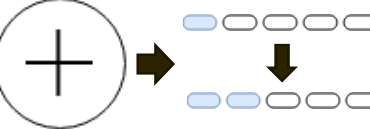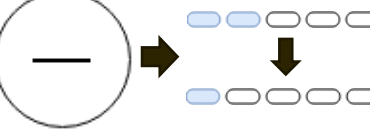

Funktion	Åtgärd	Knapp
Starta Nucu	Tryck på ON/OFF -knappen en gång. När ström indikatorn tänds är klar att använda.	
Stäng av Nucu	Håll ON/OFF -knappen helt ner tills indikatorlampan släcks (c. under 3 sekunder)	
Öka ljudnivå	Tryck indikatorn för att öka ljudnivån en gång. Med varje tryck ökar ljudnivån med ett steg.	
Minska ljudnivå	Tryck indikatorn för att minska ljudnivån en gång. Med varje tryck minskar ljudnivån med ett steg.	
Gå till föregående ljudspår	Tryck Föregående ljudspår -knapp en gång.	
Gå till nästa ljudspår	Tryck Nästa ljudspår -knapp en gång.	
Inställning för kontinuerlig upprepning av ljudspår	Tryck knappen Upprepning av ljudspår en gång. När indikatorlampan lyser spelas ljudspåret kontinuerligt. När indikatorlampan är släckt, avaktiveras kontinuerlig upprepning av ljudspåret.	
Anslut en mobil enhet som ljudkälla	Se punkt 6) Anslut en mobil enhet till Nucu	
Lägg till dina egna ljudspår till Nucu	Se punkt 7) Lägg till ljudspår till Nucu	

**Anmärkning:** Nucu stängs inte av, om den är ansluten till en datorn via en USB -kabel.

## 5) BATTERILADDNING OCH ANVÄNDNINGSTID

---

Nucu batteriet laddas med en strömförsörjning/adapter och en micro USB -kabel som anslutas i den. Nucu kan också laddas under användningen.

Uppladdning av batteriet:

### 1. Anslut USB -kabels ändrar

a) till USB -porten i strömförsörjningen



b) till Micro USB -porten i Nucu



### 2. Anslut strömförsörjning till elnätet. Det tar cirka 10 timmar att ladda ett tomt batteri.

**Användningstid:** Ett fulladdat batteri varar cirka 19 timmar.



## 6) ANSLUT EN MOBIL ENHET TILL NUCU

---

Om du vill kan du ansluta en mobil enhet till Nucuo och återge dina valda ljudspår via Nucuo.

Olika steg:

1. Anslut 3,5mm ljudkabels ändrar till

a) Nucuo



b) mobil enheten



2. Välj ljudspåret som du vill spela med mobil enheten och sätt på ljudspåret

**Anmärkning:** När en mobil enhet anslutas till Nucuo, övergår kontrollenheten till viloläge. Mobil enheten blir Nucuos användare. Det betyder att man väljer ljudspåren och sätter ljudnivån via mobil enheten.

## 7) LÄGG TILL LJUDSPÅR TILL NUCU (WINDOWS PC)

1. Kontrollera, att Nucu är avstängd och att USB -kabeln är inte ännu ansluten.
2. Anslut USB-kabelns ändar


a) till Micro USB-kontakten i Nucu



b) till USB-kontakten i datorn



3. Efter USB -kabeln är ansluten, aktiveras Nucu automatiskt. Nucu visas nu som en USB -minnesenhet på din dator

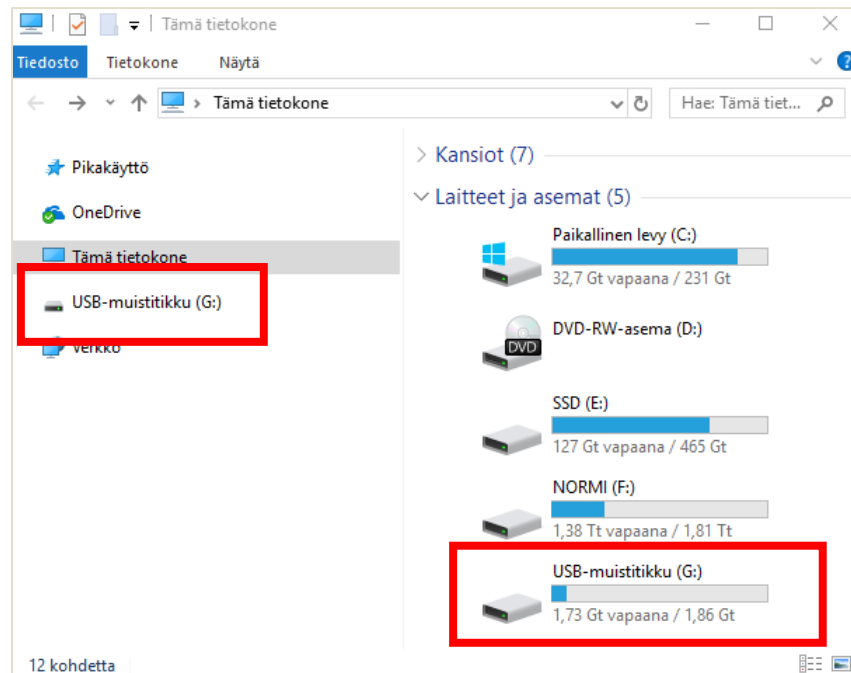


4. Kopiera de önskade .mp3- ljudfilerna till Nucus USB-minnesenhet på det vanliga sättet genom att använda klipp och klistra -funktion.

## 8) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

---

De delar som är tillverkade av tyg är maskin tvättbara. Träplattformen kan rengöras med desinfektionsmedel. Tvätt Nucu babynest vid behov.

Tygets huvudsakliga material: 100% bomull, skötselråd: 

Olika steg av rengöring:

### 1. Öppna

a) blixtlåset i vadderade kanten

b) blixtlåset i bottendelen



### 2. Dra ut

a) plattformen och madrassen ovanpå

b) vaddering i kanten



3. Rengör plattformen med en desinfektionsmedel



4. Tvätta tygdelar i tvättmaskin



5. Låt alla tygdelar torka väl

## 9) MONTERING EFTER RENGÖRING

---

När alla delar har torkad efter rengöringen, kan du ommontera babynest i normalt brukskick.

Olika steg av montering:

- 1) Justera madrassen i fickan på bottendelen av Nucuu babynest.
- 2) Skjut in plattformen under madrassen.
- 3) Sätt in vaddering i sin plats.
- 4) Tillslut noggrant blixtlåsen i bottendelen och vadderade kanten.

## 10) TEKNISKA DATA OCH REKOMMENDATIONER FÖR BRUK

---

- Rekommenderat driftstemperatur -10°C – 40°C
- Nucuu är damm- och stänktät, IP54
- Temperaturen för batteriladdningsfunktionen är begränsad till 0°C – 40°C
- Nucuu är designad och tillverkad i Finland



## 11) KUNDSERVICE

---

- [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
- [www.nucu.fi/tuki](http://www.nucu.fi/tuki) (kundstöd)