



KÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo

1)	Pakkauksen sisältö.....	3
2)	Nucun ohjausyksikön säätimet ja merkkivalot.....	4
3)	Nucun perustila.....	5
4)	Käyttö.....	6
5)	Akun lataaminen ja käyttöaika	8
6)	Mobiililaitteen liittäminen nucun	9
7)	ääniraitojen lisääminen nucun soittolistaan (windows PC).....	10
8)	Puhdistusohjeet	11
9)	Kasaaminen puhdistuksen jälkeen.....	13
10)	Tekniset tiedot ja käyttösuositukset	13
11)	Asiakastuki	13

1) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Nucupesä (lisävaruste)



Nucu alusta



Virtalähde



USB - Micro USB -kaapeli




3,5mm äänijohto

Huomautuksia:

1. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä Nucu asiakaspalveluun
 - info@nucu.fi
2. Sairaalakäytössä virtalähteen tulee olla Medical-hyväksytyt. Tarkista, että virtalähteestä löytyy "Approved Medical Device" teksti

2) NUCUN OHJAUSYKSIKÖN SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

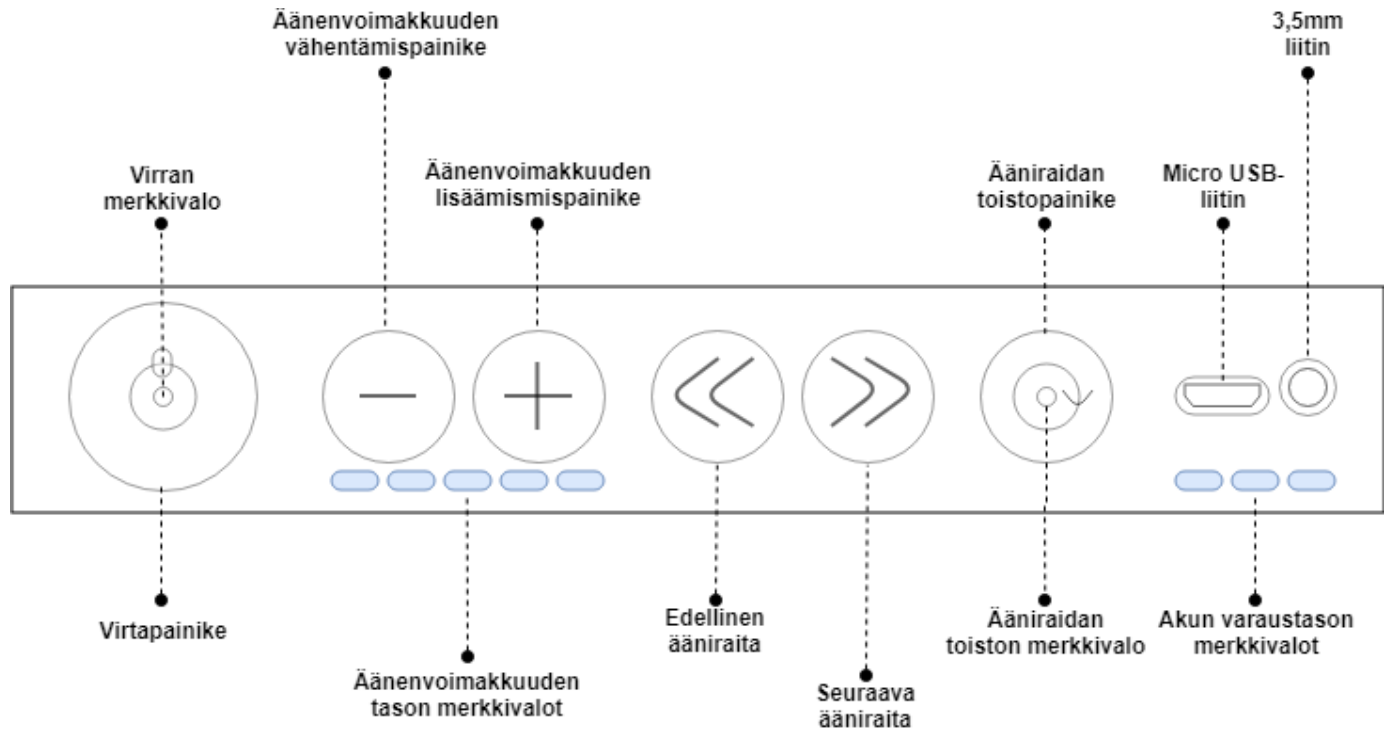

3) NUCUN PERUSTILA

Nucu menee aina käynnistyessään ns. Perustilaan. Perustilassa laite käyttää seuraavia asetuksia:

1. Toistetaan syke ääniraitaa, jos käyttäjä ei ole asettanut toisin
2. Äänenvoimakkuuden taso asetetaan tasolle kaksi
3. Ääniraidan jatkuva toistotila asetetaan päälle


Nucu sisältää aina seuraavat ääniraidat:

1. Syke
2. Sade
3. Nuku nuku nurmilintu

4) KÄYTTÖ

Nucun kaikkia toimintoja hallitaan ohjausyksikössä sijaitsevilla painikkeilla ja liittimillä.


Huomautuksia:

1. Ohjausyksikkö menee lepotilaan 30 sekunnissa mikäli mitään painikkeita ei paineta. Lepotilassa painikkeet eivät ole aktiivisia. Lepotilassa äänenvoimakkuuden tasojen sekä akun varaustason merkkivalot sammuvat
2. Ohjausyksikön saa aktivoitua lepotilasta painamalla virtapainiketta  kerran. Ohjausyksikön aktivoituessa äänenvoimakkuuden tasojen sekä akun varaustason merkkivalot syttyvät

AKTIIVINEN OHJAUSYKSIKÖ



LEPOTILASSA OLEVA OHJAUSYKSIKÖ

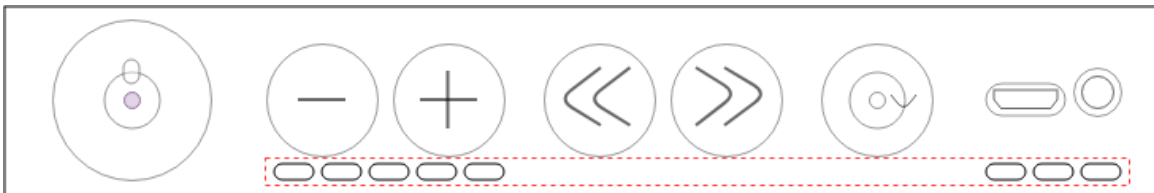

Toiminto	Toimintaohjeet	Painike
Käynnistä Nucu	Paina virtapainiketta kerran. Virran merkkivalon syttyttyä laite on käyttövalmis	
Sammuta Nucu	Pidä virtapainiketta pohjassa kunnes virran merkkivalo sammuu (noin 3 sekunnin ajan)	
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina äänenvoimakkuuden lisäämispainiketta kerran. Jokaisella painalluksella äänentaso nousee yhden pykälän	
Vähennä äänenvoimakkuutta	Paina äänenvoimakkuuden vähentämispainiketta kerran. Jokaisella painalluksella äänentaso laskee yhden pykälän	
Siirtyminen edelliseen ääniraitaan	Paina Edellinen ääniraita -painiketta kerran.	
Siirtyminen seuraavaan ääniraitaa	Paina Seuraava ääniraita -painiketta kerran	
Ääniraidan jatkuvan toiston asetus	Paina Ääniraidan toistopainiketta kerran. Merkkivalon palaessa ääniraidan jatkuva toistotila on päällä. Merkkivaloen ollessa sammuksissa toistotila on pois päältä	
Mobiililaitteen liittäminen äänilähteeksi	Kts. Kohdasta 6) Mobiililaitteen liittäminen Nucuun	
Omien ääniraitojen lisääminen Nucuun	Kts. Kohdasta 7) Ääniraitojen lisääminen Nucun soittolistaan	

Huomautus: Nucu ei sammu, jos se on kytketty USB-kaapelilla tietokoneeseen.

5) AKUN LATAAMINEN JA KÄYTTÖAIKA

Nucun akun lataaminen tapahtuu virtalähteen ja siihen liitettävän micro USB -kaapelin avulla. Nucu voidaan ladata myös sen ollessa käytössä.

Lataamisen vaiheet:

1. Kytke USB -kaapelin päät

a) virtalähteen USB -liitäntään



Nucun Micro USB -liitäntään



2. Kytke virtalähde verkkovirtaan. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää n. 10 tuntia.

Käyttöaika: Täysi akku kestää käytössä n. 19 tuntia.

6) MOBIILILAITTEEN LIITTÄMINEN NUCUN

Halutessasi voit liittää mobiililaitteen Nucun ja toistaa haluamiasi ääniä Nucun kautta.

Vaiheet:

1. Kytke 3,5mm äänijohdon päät

a) Nucun



b) mobiililaitteeseen



2. Valitse mobiililaitteella soitettava ääniraita ja laita se soimaan

Huomautus: Kun mobiililaitteeseen kytetään Nucun ohjausyksikkö menee lepotilaan. Mobiililaitteesta tulee Nucun käyttäjä. Tämä tarkoittaa, että ääniraidan valinta sekä äänenvoimakkuuden tason säätäminen tehdään mobiililaitteella.

7) ÄÄNIRAITOJEN LISÄÄMINEN NUCUN SOITTOLISTAAN (WINDOWS PC)

1. Tarkista, että Nucun on sammuksissa eikä USB-kaapelia ole vielä kytketty
2. Kytke USB -kaapelin päät


a) Nucun Micro USB -liitäntään



b) Tietokoneen USB -liitäntään




3. Nucun käynnistyy USB -kaapelin kytkemisen jälkeen automaattisesti. Nucun näkyy nyt USB-muistilaitteena omassa tietokoneessa

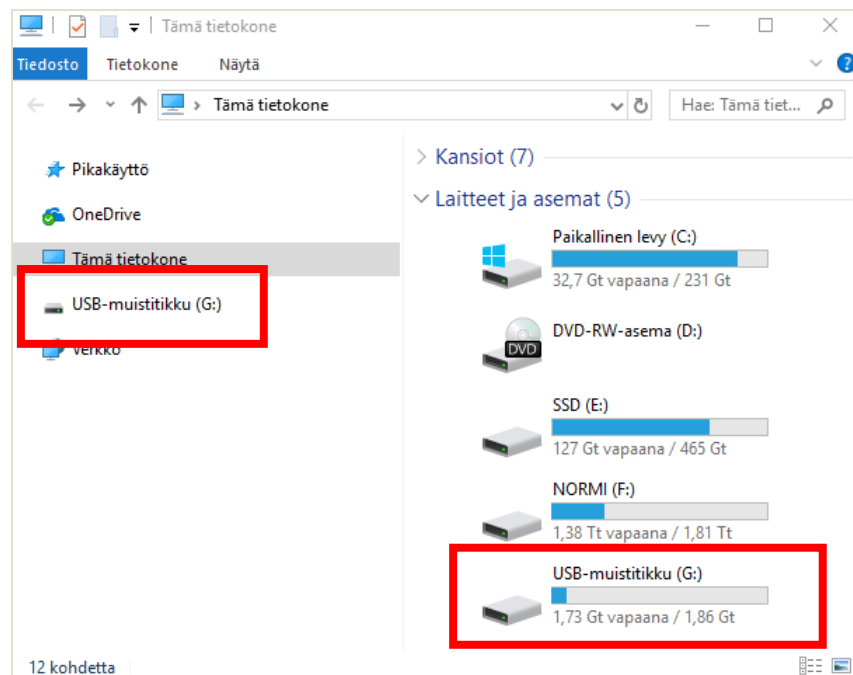

4. Kopioi haluamasi äänitiedostot Nucun USB -muistilaitteeseen normaalisti kopioi -> liitä toimintoilla

8) PUHDISTUSOHJEET

Nucun kangasosat ovat konepestäviä. Puinen alusta voidaan puhdistaa desinfiointiaineella. Pese Nucu tarpeen mukaan.

Kankaan päämateriaali: 100% puuvilla, hoito-ohjeet: 

Puhdistamisen vaiheet:

1. Aukaise

a) reunapehmusteen vetoketju

b) pohjaosion vetoketju



2. Vedä ulos

a) alusta sekä sen päällä oleva patja

b) reunapehmuste



3. Pyyhi alusta desinfiointiaineella



4. Pese kangasosat pyykinpesukoneessa



5. Anna kangasosien kuivua hyvin

9) KASAAMINEN PUHDISTUKSEN JÄLKEEN

Puhdistuksen jälkeen kaikkien osien ollessa kuivia, voit koota pesän käyttökuntoon.

Kokoamisen vaiheet:

- 1) Pujota patja pohjaosion sisään
- 2) Liu'uta alusta patjan alle
- 3) Asettele reunapehmuste paikoilleen
- 4) Sulje pohjaosion ja reunapehmusteen vetoketjut huolellisesti

10) TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Suositeltu käyttölämpötila -10 °C – 40 °C
- Nucu on pöly- ja roisketiivis, IP54
- Akun lataustoiminnon lämpötila rajoitettu 0 °C – 40 °C välille
- Nucu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa



11) ASIAKASTUKI

- info@nucu.fi
- www.nucu.fi/tuki